


## Armoire de Sécurité Ventilée Filtrée - Modèle AF 2 - Enceinte simple Non Compartimentée

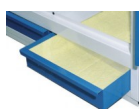

Gamme Eco Stock - Génération AFX

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 3132,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

**Modèle "AF 2"**

**Enceinte simple Non Compartimentée**

Dimensions extérieures :

1900 x 800 x 545 mm / poids 140 Kg

Dimensions intérieures :

1500 x 780 x 500 mm

4 Etagères

Capacité de stockage 140 L

**Armoires de Sécurité Ventilées Filtrées - Gamme Eco Stock - Génération AFX**

- Armoire autonome sans raccordement - Nouvelle Génération AFX

- Elimination des vapeurs dangereuses dans l'environnement immédiat de l'armoire
- Enceinte compartimentable pour un stockage par famille de produits
- Cellules au charbon actif à usages spécifiques, Testées à la Norme NFX 15-211

La cellule filtrante est composée d'un Filtre à Charbon Actif spécialisé, traité en fonction des produits stockés et d'un Filtre Anti-poussières efficace à 92% des particules < 3?

Fenêtre de Contrôle de la présence du filtre adapté à vos besoins (couleurs normatives)

Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864

Caisson de Ventilation et de Filtration

avec Ventilateur à Volute 55,5 db (A) et cellule filtrante au charbon actif.

Ventilateur 220V, 50Hz 215 m3/heure de débit.

Protection IP 44

Construction en Acier 15/10 ème, Porte double paroi

Peinture époxy, toutes surfaces

Double fermeture à clé

Grilles d'aération en partie basse

Bac-tiroir de rétention avec Tapis à haut pouvoir absorbant, accessible et nettoyable facilement

Etagères perforées réglables en hauteur par crémaillères

Grande porte vitrée en polycarbonate

Visualisation immédiate des produits stockés ou Option Double Porte pour les modèles compartimentés

#### En Option :

- Contrôle ponctuel de saturation du filtre à l'aide de Tubes Réactifs (Pompe et Tubes à Commander séparément)

#### ET / OU

- Contrôle électronique du Bon Fonctionnement de l'armoire par Boîtier FiltrAlarme

Un voyant lumineux et un signal sonore indiquent un éventuel dysfonctionnement.

Le module doit être commandé en option et installé en usine.

#### CHOIX DU FILTRE

Un Filtre à Charbon Actif spécifiquement traité en fonction des produits stockés assure l'élimination des vapeurs dangereuses dans l'enceinte et dans l'environnement immédiat de l'armoire

Mobilab propose 2 modèles de Filtres, vous devez choisir en fonction de la famille de produits dont la proportion stockée est majoritaire.

**FILTRE "VERT" CORG 300 : USAGE POLYVALENT**

**FILTRE "JAUNE" ORG 300 : POUR VAPEURS ORGANIQUES**

#### "CORG" Nouveau filtre à usage Polyvalent...

Permet d'absorber la plupart des solvants organiques, acides organiques et minéraux représentés dans les laboratoires d'enseignement...(Testés NFX 15.211-2)